



Pipette multicanale Pipet-Lite XLS+

Peso ridotto e prestazioni di alto livello

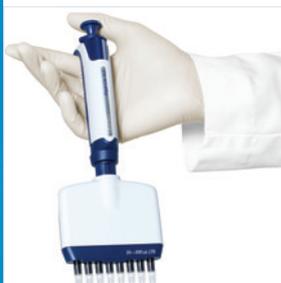

Peso ridotto

Il design ergonomico della pipetta multicanale Pipet-Lite XLS+ garantisce prestazioni e praticità d'uso eccezionali, anche nell'uso prolungato. La pipetta è solida e ben bilanciata; l'impugnatura ergonomica si caratterizza per l'eccellente finitura.

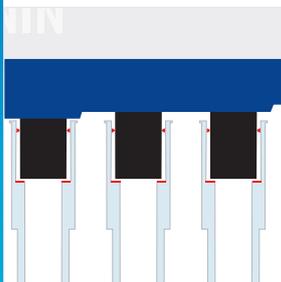

Basta un tocco leggero

Il sistema LiteTouch di Rainin è insuperabile in termini di ergonomia e semplicità d'uso. Grazie alla superficie di tenuta ridotta e all'arresto fisso, il design dello shaft e del puntale LTS brevettato di Rainin garantisce una tenuta rapida e perfetta su tutti i canali. L'espulsione dei puntali, semplice e graduale, richiede uno sforzo minimo.



Maggiore controllo

Ergonomica e tecnologicamente avanzata, Pipet-Lite XLS+ è una delle pipette multicanale più reattive e semplici da usare disponibili sul mercato. La corsa del pistone è fluida e omogenea dall'inizio alla fine.



Prelievi omogenei

Oltre che per il sistema LTS, le pipette multicanale XLS+ si caratterizzano per il loro innovativo design, grazie al quale l'aspirazione risulta essere uniforme e regolare su tutti i canali.



Pipette multicanale Pipet-Lite XLS+ Ripetibilità e prestazioni superiori

Oltre a vantare un eccellente design ergonomico, Pipet-Lite™ XLS+™ Rainin è una delle pipette multicanale tecnicamente più avanzate attualmente disponibili sul mercato. Dotata del sistema LiteTouch™ brevettato di Rainin (tecnologia LTS™), questa pipetta è estremamente rapida da caricare e garantisce una praticità d'uso eccellente, oltre ad assicurare il prelievo omogeneo e accurato dei campioni su tutti i canali. Realizzata con materiali di alta qualità e dotata di un'eccellente robustezza, Pipet-Lite XLS è stata progettata in modo tale da garantire affidabilità e omogeneità di funzionamento elevate per lungo tempo. Come per gli tutti gli altri modelli XLS Rainin, il chip RFID integrato offre la tracciabilità avanzata dei dati di taratura.

Pipette multicanale Pipet-Lite XLS+

Prestazioni che si toccano con mano

Funzioni avanzate

- Formato a 8 e 12 canali con volumi da 1 a 1.200 µL
- Prelievo omogeneo dei campioni e tenuta perfetta su tutti i canali, grazie al sistema LTS
- Massima semplicità e rapidità di montaggio dei puntali, minimo sforzo richiesto per l'espulsione
- Guarnizione ermetica sempre affidabile
- Impugnatura e gancio per le dita dal design ergonomico
- Regolazione del volume con funzione di blocco, per evitare il rischio di variazioni accidentali
- Sforzo del pollice ridotto al minimo, grazie all'ammortizzatore integrato nell'espulsore del puntale
- Chip RFID per la gestione delle pipette



Caratteristiche tecniche

Specifiche

Modello	Volume (µL)	Incremento (µL)	Accuratezza		Ripetibilità	
			%	µL (±)	%	µL (±)
10 µL	1,0	0,02	4	0,04	5	0,05
	5,0		1,5	0,075	1,5	0,075
	10,0		1	0,1	0,5	0,05
20 µL	2	0,02	7,5	0,15	4	0,08
	10		1,5	0,15	1,5	0,15
	20		1	0,2	0,5	0,1
50 µL	5	0,05	3,5	0,18	2	0,1
	25		1,2	0,3	0,5	0,125
	50		0,8	0,4	0,4	0,2
200 µL	20	0,2	2,5	0,5	1,2	0,24
	100		0,8	0,8	0,25	0,25
	200		0,8	1,6	0,3	0,6
300 µL	30	0,5	2,5	0,75	1,5	0,45
	150		0,8	1,2	0,3	0,45
	300		0,8	2,4	0,25	0,75
1200 µL	100	2	3,6	3,6	1	1
	600		0,8	4,8	0,3	1,8
	1200		0,8	9,6	0,2	2,4

Informazioni per l'ordine

N. d'ordine	Descrizione	Range di volume
8 canali		
17013802	L8-10XLS+	0,5-10 µL
17013803	L8-20XLS+	2-20 µL
17013804	L8-50XLS+	5-50 µL
17013805	L8-200XLS+	20-200 µL
17013806	L8-300XLS+	20-300 µL
17014496	L8-1200XLS+	100-1.200 µL
12 canali		
17013807	L12-10XLS+	0,5-10 µL
17013808	L12-20XLS+	2-20 µL
17013809	L12-50XLS+	5-50 µL
17013810	L12-200XLS+	20-200 µL
17013811	L12-300XLS+	20-300 µL
17014497	L12-1200XLS+	100-1.200 µL



Mettler-Toledo Rainin, LLC

Soggetto a modifiche tecniche
 © 03/2018 Mettler-Toledo Rainin, LLC
 Stampato in Svizzera 17700763 Rev J



I MARCHI RAININ: Rainin, Pipet-Lite, XLS, XLS+, LTS, Pipetting 360° e LiteTouch sono marchi registrati di Mettler-Toledo Rainin, LLC.

www.mt.com/rainin

Per maggiori informazioni